

OMRON

BF 306

Определитель жировых отложений в организме

Модель OMRON BF 306

Изготовитель:

фирма OMRON МАТСУСАКА Ко. ЛТД, 1855-370 КУБО-ЧО,
МАТСУСАКА СИТИ МЕ Преф. 515-8503, Япония, JP

Производственный филиал:

OMRON ХЭЛСКЭА ЕВРОПА Б.В.
Круизвег 577, НЛ-2132
Хуфдорп, Нидерланды, NL

Официальным представителем фирмы OMRON CORPORATION (Япония)
по распространению медицинской бытовой техники на территории Рос-
сии является ЗАО «КомплектСервис».



Зарегистрированная торговая марка
ЗАО «КомплектСервис»



Руководство по эксплуатации

Желаем Вам здоровья

Благодарим Вас за покупку определителя жировых отложений в организме OMRON BF 306. Для правильного использования данного прибора и получения надежных результатов найдите, пожалуйста, несколько минут, чтобы внимательно ознакомиться с данным Руководством по эксплуатации.

Пожалуйста, всегда держите это Руководство под рукой или храните его в надежном месте, чтобы иметь возможность обращаться к нему в будущем при эксплуатации прибора.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Меры предосторожности и правила хранения	3
1.1. Важная информация.	3
1.2. Уход и хранение	4
1.3. Достоинства прибора	4
2. Как правильно провести измерение	5
2.1. Рекомендуемое время проведения измерений	5
2.2. Условия, не подходящие для проведения измерений.	5
2.3. Случаи, в которых результаты измерений могут быть некорректными	6
2.4. Рекомендации по проведению измерений	6
3. Использование определителя жировых отложений в организме	7
3.1. Описание прибора.	7
3.2. Установка и замена элементов питания	9
3.3. Установка индивидуальных данных пользователя перед началом измерения.	9
3.4. Проведение измерений.	10
3.5. Установка и использование персонального номера пользователя	11
3.6. Изменение установленных значений	12
4. Как оценить полученные результаты измерений	12
4.1. Значения индекса массы тела (BMI).	12
4.2. Процентное содержание жировых отложений в организме	13
5. Неисправности	14
5.1. Возможные причины получения недостоверных результатов измерений	14
5.2. Описание кодов ошибок.	14
5.3. Неисправности.	15
6. Технические характеристики	16
Гарантийный талон	между 10 и 11

1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

1.1. Важная информация

Пожалуйста, внимательно прочтите приведенные ниже инструкции, так как они содержат информацию, относящуюся к вводу исходных данных, использованию и правилам хранения Вашего определителя жировых отложений в организме OMRON BF 306.

Сохраните это Руководство, чтобы иметь возможность обращаться к нему в будущем.

Запрещается разбирать прибор.

Не пытайтесь самостоятельно разобрать прибор. За исключением элементов питания, он не содержит деталей, которые могут быть отремонтированы потребителем самостоятельно.

Не подвергайте прибор сильным ударным нагрузкам.

Запрещается погружать прибор в воду.

Даже если у пациентов, пользовавшихся данным прибором, не было выявлено никаких побочных явлений, определитель жировых отложений в организме **не следует применять**:

- при острых инфекционных заболеваниях;
- лицам, имеющим медицинские имплантаты (например, электрокардиостимулятор);
- лицам, страдающим любыми видами сердечно-сосудистых заболеваний. Перед приобретением прибора им следует проконсультироваться со своим лечащим врачом.

Запрещается использовать прибор:

– в комбинации с системой искусственной вентиляции легких и другими электронными системами поддержания жизни;

– в комбинации с электрокардиографами и другими (портативными) медицинскими приборами.

Не пользуйтесь определителем жировых отложений в условиях повышенной влажности, например, в сауне или в душе.

Храните прибор в местах, недоступных детям и немощным людям.


Если Вы обнаружили, что Ваш определитель жировых отложений в организме неисправен или происходят какие-либо сбои в его работе, немедленно прекратите его использование и выключите прибор. Любые виды ремонта может производить только уполномоченный представитель компании OMRON, использующий сертифицированные запасные части.

1.2. Уход и хранение

Чистку аппаратного блока выполняйте сухой мягкой тканью. Если на основном приборе имеются трудноудаляемые пятна, протрите их тканью, слегка смоченной водой или раствором моющего средства, и удалите остатки воды сухой тканью.

Избегайте попадания на прибор большого количества воды – это может привести к его поломке.

Не используйте для очистки прибора бензол, бензин, растворители красок, спирт и очистители.

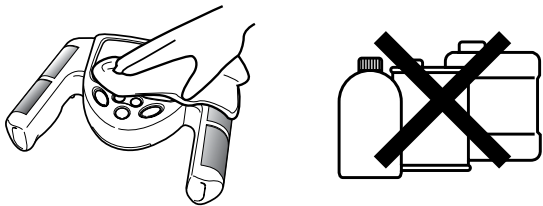

1.3. Достоинства прибора

Точность измерений

Процентное содержание жировых отложений в организме определяется на основе измерения электрического сопротивления с учетом таких индивидуальных данных пациента, как вес, рост, возраст и пол. Результаты измерений полностью соответствуют данным, полученным при проведении аналогичного измерения методом подводного взвешивания и методом DEXA (Dual Energy X-ray Absorptiometry) – методом двойного измерения поглощения рентгеновского излучения, признанными в качестве стандартных методов измерения процентного содержания жировых отложений в организме.

Определитель жировых отложений в организме, модель OMRON BF 306, испытан и зарегистрирован в России:

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СРЕДСТВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ, ПРИБОРОСТРОЕНИЯ, МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (ОС «Сертиформ ВНИИНМАШ»)

Сертификат соответствия:

OMRON BF 306 № РОСС JP. ME20. C00168 от 09.12.2002 г. на партию.

Соответствует требованиям:

ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88),

ГОСТ Р 51318.14.1-99 (СИСГР 14.1-93).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Санитарно-эпидемиологическое заключение:

OMRON BF 306 № 77.99.04.944.Д.008479.12.02, от 15.12.2002 г.

Соответствует санитарным правилам:

СанПиН 2.2.2.542-96, СанПиН 2.2.4.723-98, СН 1757-77, СН 2.6.1.758-99 (НРБ 99), СН № 3057-84,

ГОСТ 12.1.002-84, ГОСТ 12.1.028-80, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, МСанПиН 001-96, ПДУ 1742-77, Р 2.2.755-99

